

MEAB

ADMCS-10 - 微型 - AKUFVE



ADMCS-10 型仪器是**AKUFVE**仪器的缩小版，便于提高溶剂萃取分布数据测量技术的准确性和迅速性。

MEAB Metallextraktion AB, 瑞典阿斯基市 Datavägen 街 51 号 (邮政编码: SE-43632)

☎ +46 31 685414.

传真: +46 31 685474.

www.meab-mx.se

瑞典

contact@meab-mx.se

MEAB ChemieTechnik GmbH, 德国亚琛市 Dennewartstrasse 街 25 号 (邮政编码: D-52068)

☎ +49 241 9631180.

传真: +49 241 9631185.

www.meab-mx.com


德国

contact@meab-mx.com

ADMCS-10 型仪器 – 微型 - AKUFVE

ADMCS-10 型仪器是一种动态混合器/离心式分离器（微型—AKUFVE）装置，该装置由以下部件组成：

- 一台动态混合器（约 150 毫升），并配有变速搅拌器
- H 型离心机（H-10 型，约 15 毫升），装配含有变频器的交流电动机
- 该流量系统装有调速阀、导向阀、取样阀，换热器、流量计以及压力计

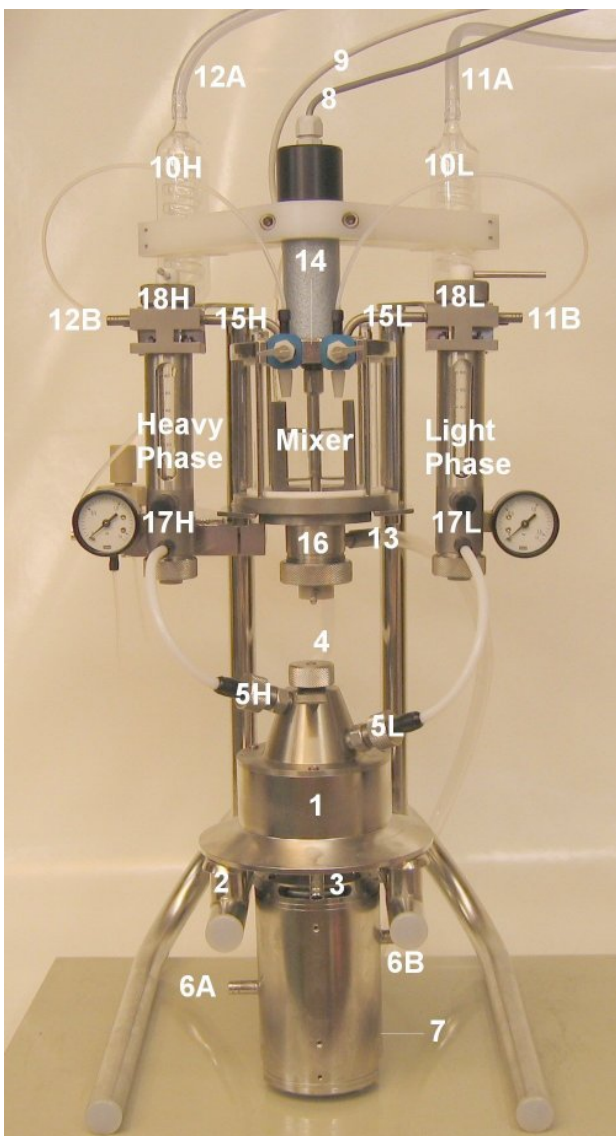

- 1 H-10 型离心机
- 2 离心机专用橡胶减震垫
- 3 离心机排水管
- 4 离心机混合物进口（位于背面）
- 5 离心机出口：（L）轻相和（H）重相
- 6 离心机电机冷却套：（A）进水口和（B）出水口
- 7 离心机电机导线（位于背面）
- 8 混合器电机导线
- 9 温度传感器导线
- 10 玻璃冷却/换热器：（L）轻相和（H）重相
- 11 送至（A）和送自（B）辐射度探测器的轻相
- 12 送至（A）和送自（B）辐射度探测器的重相
- 13 混合器排水管
- 14 液体入口总管
- 15 分离相的异程：（L）轻相和（H）重相
- 16 混合物出口调节阀
- 17 节流阀：（L）轻相和（H）重相
- 18 导向阀：（L）轻相和（H）重相

- ADMCS-10 型装置尺寸：65cm × 32cm × 40cm（高 × 宽 × 长）。

- 供电要求为：单相 220/110 伏，频率 50/60 赫兹。